


## Spécification du produit

Fisscure est un dispositif mécanique à commande manuelle composé d'un tube cylindrique à pointe conique, équipé d'un mécanisme d'action interne nécessaire à la libération de 4 aiguilles de la surface du cylindre perpendiculaire à l'axe longitudinal du dispositif, séparées par une distance angulaire de 90°. Le mécanisme est actionné par le médecin à partir de la partie terminale du dispositif, où se trouve une poignée que l'on peut tourner le long de l'axe du dispositif et qui est dotée d'un bouton de sécurité permettant de débloquer ou de bloquer le mécanisme d'action interne.

Le cylindre extérieur est équipé de lignes de mesure qui permettent d'insérer en toute sécurité le dispositif à la profondeur nécessaire pour effectuer le traitement au bon endroit dans le canal anal.

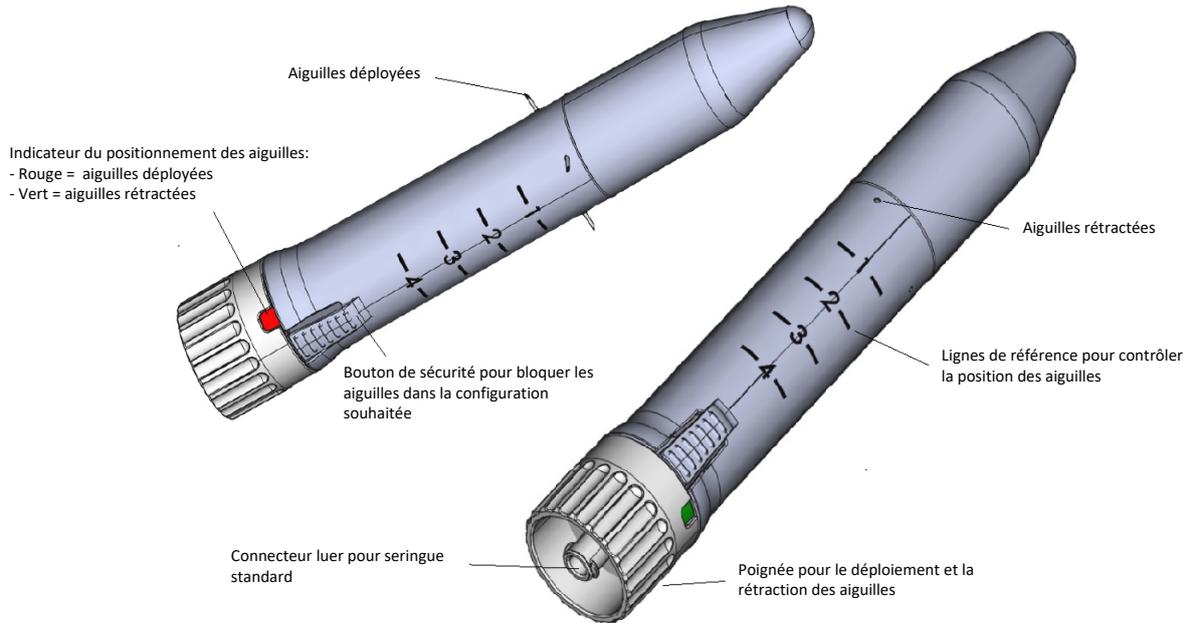

Attribut	Description
Longueur	152 mm
Diamètre du corps	22,5 mm
Diamètre de la poignée	25,5 mm
Poids	27,5 gr
Connectivité de la seringue	Luerlock standard
Matériaux en contact avec le patient	Mélange de polymères ABS/PC (Bayblend M850 XF) coloré avec Mevopur-Blue SB5M176382-ZA, acier inoxydable AISI 304, PLT 34 - 165 (encre noire sur le manteau)
Matériaux en contact avec le médicament à appliquer	TPE (Chemiton Med TMB0NA80.001), MABS (Terlux 2822HD), acier inoxydable AISI 304 et Mevopur-Blue SB5M176382-ZA (couleur de la poignée)
Aiguille	Type de biseau : lancette courte ; matériau : AISI304 ; diamètre intérieur : 0,40 mm ; diamètre extérieur : 0,60 mm
Statut de stérilité	Dispositif livré en état stérile après stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Emballage	Blister PET scellé avec une couche de Tyvek